

## KONTAKT HANDLOWY

[biuro@sorimex.pl](mailto:biuro@sorimex.pl)

CENTRUM  
tel. +48 56 657 77 00  
kom. +48 513 146 617  
[centrum@sorimex.pl](mailto:centrum@sorimex.pl)

WSCHÓD  
tel. +48 56 657 77 03  
kom. +48 513 146 615  
[wschod@sorimex.pl](mailto:wschod@sorimex.pl)

ZACHÓD  
tel. +48 91 421 27 94  
kom. +48 513 146 609  
[zachod@sorimex.pl](mailto:zachod@sorimex.pl)

POŁUDNIE  
tel. +48 56 657 77 01  
kom. +48 513 146 602  
[poludnie@sorimex.pl](mailto:poludnie@sorimex.pl)



SORIMEX sp. z o.o. sp. k.  
ul. Równinna 25  
87-100 Toruń  
tel. +48 56 657 77 20  
fax +48 56 657 77 21

[www.sorimex.eu](http://www.sorimex.eu)



- EN ISO 13485:2003+AC:2009
- EN ISO 10993-1,5, 10:2009
- EN 60601
- EN ISO 9919:2009
- Produkowane zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC

## ZASTOSOWANIE

Czujniki mają zastosowanie tam, gdzie wymagany jest stały nadzór nad czynnościami życiowymi pacjenta. W miejscu przeprowadzania zabiegów z udziałem anestezjologa i na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

## DOBÓR

Przy doborze czujników oprócz określenia typu urządzenia, do jakiego ma być podłączony, należy uwzględnić wiek, a właściwie wagę pacjenta. Dobór typu czujnika zależy od jego przeznaczenia. Istnieje kilkadziesiąt marek pulsoksymetrów, które często różnią się zastosowanymi technologiami i rozwiązaniami technicznymi, np. wtykami. Ze względu na różnorodność złączy i ich zmian przez producentów aparatów, przy doborze czujnika należy zwrócić szczególną uwagę na model aparatu i rok jego produkcji.

W zależności od potrzeb zastosowanie mają czujniki jedno i wielorazowe.

## UWAGA

Oprócz czujników, które znajdują Państwo w katalogu (dostępnym na stronie internetowej) dysponujemy czujnikami oryginalnymi. Jeżeli nie znaleźli Państwo poszukiwanego asortymentu z grupy SpO2 prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym.

CE 0197





## JEDNORAZOWE CZUJNIKI SPO2

Kompatybilne z Nellcor, Ohmeda, Novamatrix, Criticare, BCI, Datascope, Datex, Nihon Kohden.

### SPECYFIKACJA

- materiał na kable - osłona z PVC, biały, średnica 3,2 mm
- LED - 660nm/905nm/940nm
- opakowanie - 24 szt./opakowanie
- długość kabla - 0.9m
- złącze - wtyk z PVC z połączanymi pinami
- fotodetektor - 4mm/8mm
- typ czujnika - niebieska pianka, materiał tekstylny 3M

### TYPY

#### 1. Nieadhezyjny czujnik jednorazowego użycia

Produkowany w 2 rozmiarach (w zależności od wagi pacjenta)

- dorosły / noworodek (>30kg / <3kg)
- dziecko / niemowlę (3-40kg)

Materiał - miękki biomedycznie kompatybilny materiał piankowy z taśmą mocującą Velcro

#### 2. Adhezyjny czujnik jednorazowego użycia

Produkowany w 4 rozmiarach

- dorosły (>30kg)
- dziecko (15-40kg)
- niemowlę (3-15kg)
- noworodek (<3kg)

Materiał - samoprzylepna taśma tekstylna 3M

#### 3. Jednorazowa taśma do pozycjonowania SensMate

Używana tylko z czujnikiem wielopunktowym (Y)

- dorosły (>40kg)
- dziecko (15-40kg)
- niemowlę / noworodek (1-15kg)

Materiał - samoprzylepna pianka 3M



## WIELORAZOWE CZUJNIKI SPO2

Kompatybilne z Nellcor, Ohmeda, Philips, Marquette, Spacelabs, Novamatrix, Criticare, BCI, Datascope, Datex, Nihon Kohden, Palco, ect.

### SPECYFIKACJA

- złącze czujnika - kompatybilny, nylonowy adapter z połączanymi pinami
- LED i fotoczujnik - 660nm/905nm/940nm LED 4mm ceramiczny lub plastikowy lub 8 mm fotoczujnik plastikowy
- materiał i kolory kabli - izolator TPU, jasnoszary, jasnoniebieski, żółty
- długość i średnica kabla - kabel 0.3m/1.1m/1.5m/3.0m; 4.00mm, 2.60mm
- obudowa czujnika - korpus z ABS (klips palcowy); korpus silikonowy ('soft' i wielopunktowy)




## ADAPTERY, KABLE PRZEDŁUŻAJĄCE

Kompatybilne z Nellcor, Ohmeda, Philips, Marquette, Spacelabs, Novamatrix, Criticare, BCI, Datascope, Datex, Nihon Kohden, Palco, ect.

### SPECYFIKACJA

- materiał na kable - osłona z TPU, jasny szary, niebieski
- długość kabla - 1.1m/2.2m/3.0m
- opakowanie - 1 szt./opakowanie
- złącze - nylonowy wtyk z połączanymi pinami
- średnica kabla - 4.0mm/5.0mm

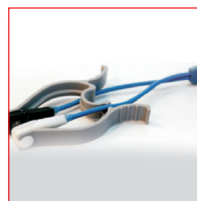

## AKCESORIA SPO2

- owijka na piance Velcro
- klips uszny dla dorosłych, stosowany z Nellcor SWYG11-01 (D-YS) i kompatybilny z Nellcor SWYD11-01 (D-YSE)
- klips na język dla dużych zwierząt
- klips dla średnich zwierząt
- opaska silikonowa do czujników typu ,Y'
- wielorazowa owijka piankowa z 3 otworami dla wszystkich rozmiarów
- jednorazowa taśma tkaninowa 3M

